

Versioni dell'IQ-Cath

Catetere monouso con strato idrofilo

| | IQ-Cath | pronto per l'uso | extra | lunghezza | CH |
|--|------------------------------------|------------------|--------|-----------|-----------------------|
| Confezione funzionale | 20 <input type="checkbox"/> | No | – | 43 cm | ● ○ ● ● ● ● |
| | 21 <input type="checkbox"/> | Si | – | 43 cm | ● ○ ● ● ● ● |
| Confezione "Peel" | 29 | No | – | 43 cm | ● ○ ● ● ● ● |
| | 29 | No | – | 33 cm | ● ○ ● ● ● ● |
| | 29 | No | – | 17 cm | ● ○ ● ● ● ● |
| | 23 | immediatamente | – | 43 cm | ● ○ ● ● ● ● |
| | 23 | immediatamente | – | 33 cm | ● ○ ● ● ● ● |
| | 23 | immediatamente | – | 17 cm | ● ○ ● ● ● ● |
| Sacca di raccolta dell'urina | 43 | immediatamente | Sleeve | 43 cm | ● ○ ● ● ● ● |
| | 43 | immediatamente | Sleeve | 33 cm | ● ○ ● ● ● ● |
| | 26 <input type="checkbox"/> | Si | – | 43 cm | ● ○ ● ● ● ● |
| <input type="checkbox"/> anche con imballo addizionale | | | | | 10 12 14 16 18 |

NUOVO – Previsto per essere disponibile nel trimestre 2/2018

Catetere monouso per l'uso con gel lubrificante

| | IQ-Cath | pronto per l'uso | extra | lunghezza | CH |
|--|-----------------------------|------------------|-------|-----------|-----------------------|
| Confezione funzionale | 30 <input type="checkbox"/> | No | – | 43 cm | ● ○ ● ● ● ● |
| | 31 <input type="checkbox"/> | Si | – | 43 cm | ● ○ ● ● ● ● |
| | 32 | immediatamente | – | 43 cm | ● ○ ● ● ● ● |
| Sacca di raccolta dell'urina | 36 <input type="checkbox"/> | Si | – | 43 cm | ● ○ ● ● ● ● |
| <input type="checkbox"/> anche con imballo addizionale | | | | | 10 12 14 16 18 |

Avete domande riguardanti i cateteri monouso IQ-Cath.
Vi preghiamo di chiamarci o di scriverci una email.

Tel. 02.99045678 r.a.
info@manfredsauer.it



MANFRED SAUER ITALIA S.R.L.

Viale della Repubblica 28 • 20037 Paderno Dugnano (MI)
Tel. 02.99045678 r.a. • Telefax 02.91084256
info@manfredsauer.it • www.manfredsauer.it



IT 2018-02
REF 99.909



MADE IN GERMANY Sviluppamo e fabbrichiamo i nostri prodotti a Lobbach, Germania.



MANFRED SAUER GMBH
Hersteller von Medizinprodukten

Neurott 7 – 15 • 74931 Lobbach • Germany
Tel. +49 6226 960 104 • Fax +49 6226 960 011
export@manfred-sauer.de • www.manfred-sauer.com



MANFRED SAUER GMBH
Hersteller von Medizinprodukten

iQ CATH

Cateteri a tre zone funzionali



**Catetere monouso
per un cateterismo delicato**


Cateteri a tre zone funzionali



Configurazione del catetere IQ-Cath

4-6 volte al giorno, 150 volte al mese, 1800 volte all'anno: così spesso chi pratica l'autocaterismo intermittente infila il catetere nell'uretra per svuotare la vescica.

In questi casi è di fondamentale importanza la qualità e la sicurezza nell'uso dei cateteri, per prevenire dall'inizio qualsiasi tipo di lesione!

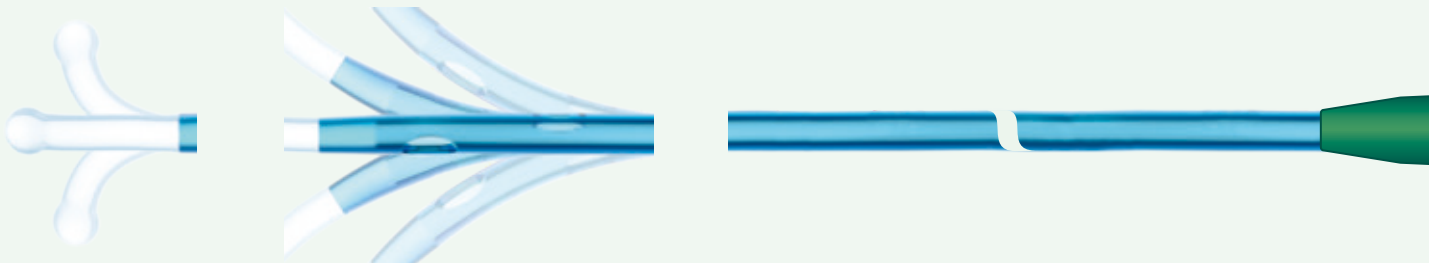

Testa arrotondata (brevettata) Zona flessibile (brevettata)

La testa dell'IQ-Cath consiste in una sfera morbida che si trova nella parte anteriore estremamente morbida e flessibile. Attraverso questa combinazione il catetere può passare stenosi, diverticoli ecc. quasi senza resistenza.

Grazie alla combinazione della testa arrotondata con la parte anteriore flessibile, IQ-Cath è capace di seguire il corso dell'uretra in modo delicato.

Zona guida

Quest'area dell'IQ-Cath che si estende fino al connettore è relativamente rigida, facilitando così l'inserimento.



Occhielli arrotondati: Gli occhielli del catetere sono arrotondati per prevenire qualsiasi tipo di lesione dell'epitelio di rivestimento dell'uretra.



I video dimostrativi sono stati realizzati dagli stessi utenti a scopo dimostrativo, con l'intenzione di aiutarvi a trovare il miglior metodo per maneggiare l'IQ-Cath effettuando l'autocaterismo intermittente.

Sleeve

Inserimento senza toccare il catetere

"Sleeve" è una pellicola sottile che circonda tutto il catetere e assicura l'inserimento senza toccare il catetere.



Confezione "Peel"

Maneggiamento facile

Gli orifici per le dita permettono di "pelare" ("peel") il catetere in modo delicato e facile senza toccarlo direttamente.



Confezione funzionale

Uso svariato

La confezione funzionale può essere usata come prolunga per uno svuotamento diretto dell'urina nella toilette. A questo scopo spingere il catetere il più avanti possibile finché il connettore chiude ermeticamente.

Linee di strappo

- 1 Aprire
- 2 Strappando di scatto si ottiene un pezzo di pellicola ("guaina di scorrimento") che serve come ausilio per inserimento

"Guaina di scorrimento"



Tutto in uno

Versione ...

... per il catetere con strato idrofilo o per l'uso con gel lubrificante. Capienza della sacca di raccolta dell'urina 1 litro.

